

Система комплексной интеграции продуктов «1С»

(РИЦ модуль обмена с 1С)

**Документация, содержащая описание процесса установки
решения**


Листов: 9

Содержание


1	Установка решения через пользовательский интерфейс	3
2	Установка решения через конфигуратор	6
3	Требования к аппаратно-вычислительному комплексу	9

1 Установка решения через пользовательский интерфейс


Для установки «РИЦ модуль обмена с 1С» через пользовательский интерфейс необходимо зайти в программу 1С:Медицина. Больничная аптека, редакция 2 под пользователем с полными правами, в панели разделов выбрать «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и обработки».

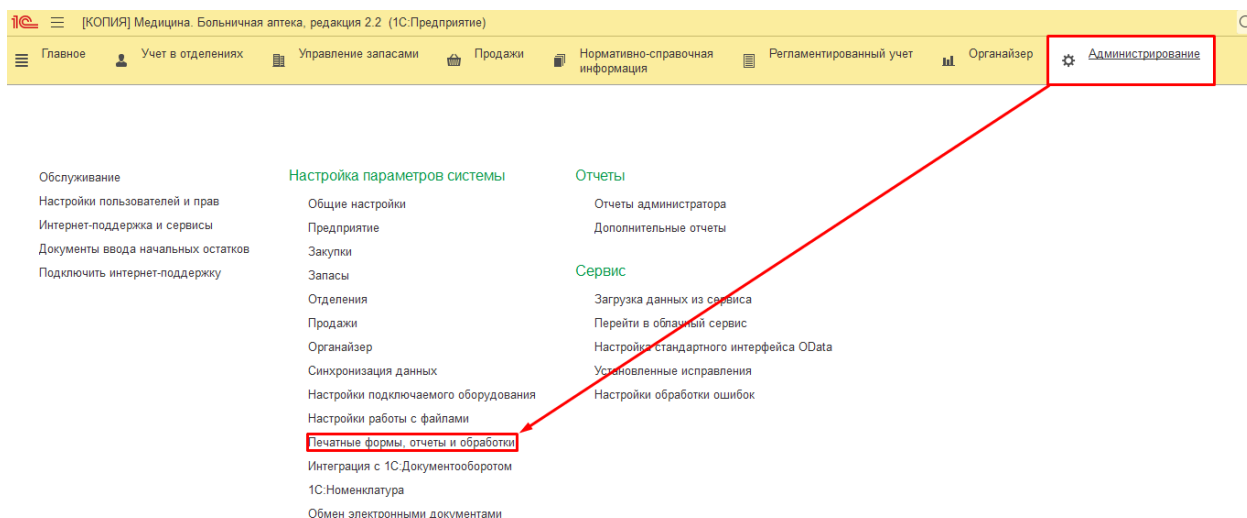


В открывшейся форме нажать на гиперссылку «Расширения».

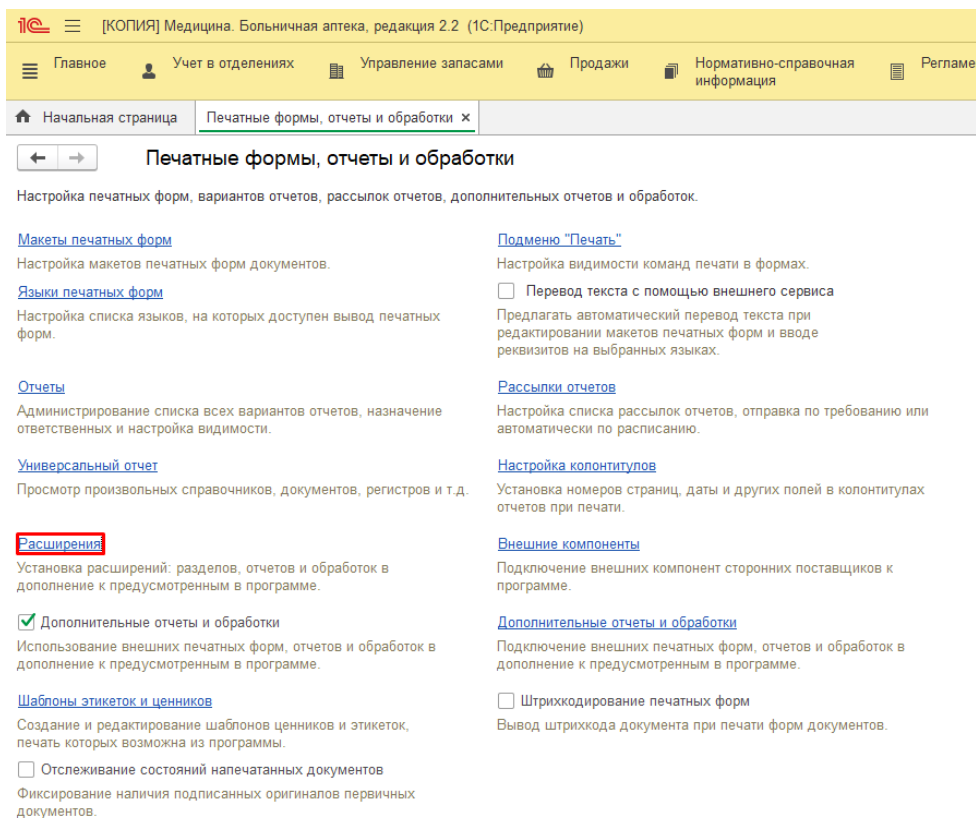


Далее нажать кнопку «Добавить из файла...». Если при этом появилось окно с предупреждением безопасности, необходимо в нем нажать кнопку «Продолжить».

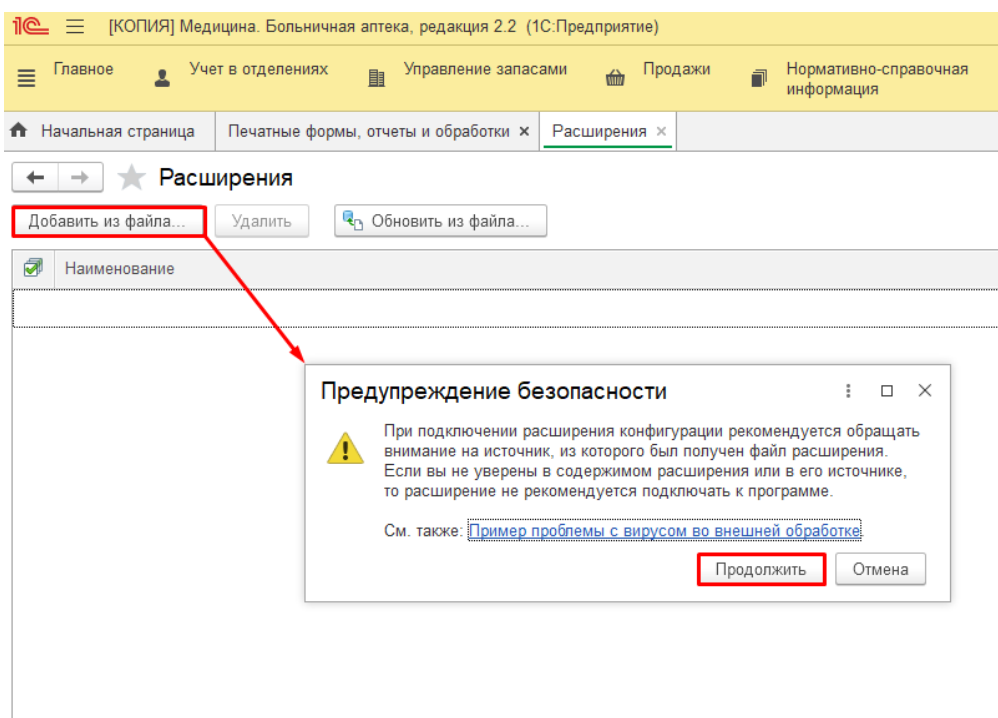

Выбрать из каталога расширение.

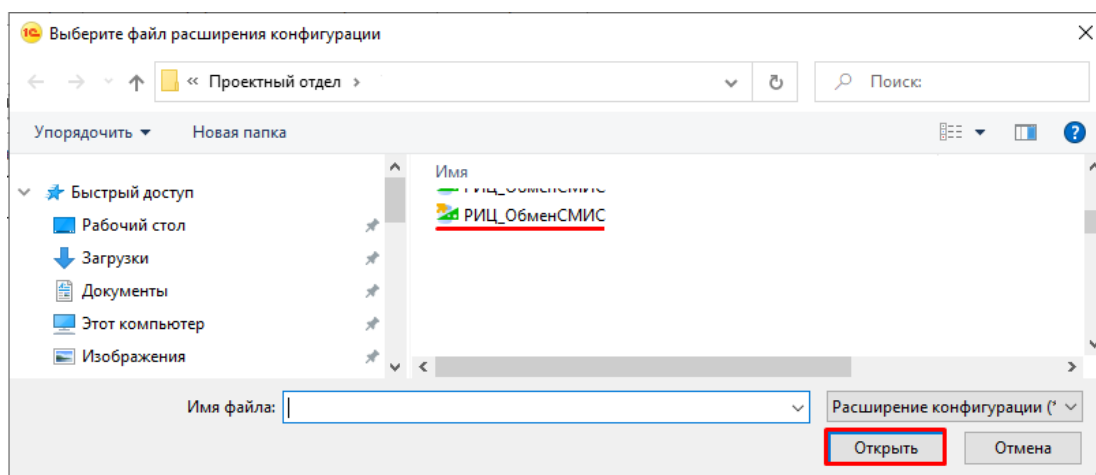

После загрузки расширения, оно отобразится в списке, и появится предупреждение, что необходимо перезапустить программу.

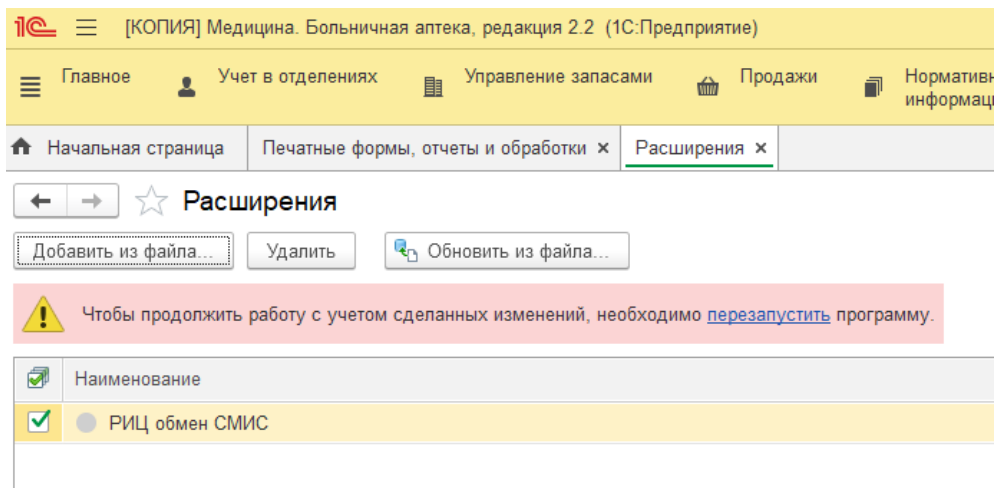


После перезапуска программы можно начинать использование модуля «РИЦ модуль обмена с 1С».


2 Установка решения через конфигуратор

Альтернативным способом установки «РИЦ модуль обмена с 1С» является установка через конфигуратор. Для этого необходимо запустить 1С:Медицина. Больничная аптека в режиме конфигулятора под пользователем с полными правами.


В меню выбрать «Конфигурация» – «Расширения конфигурации».

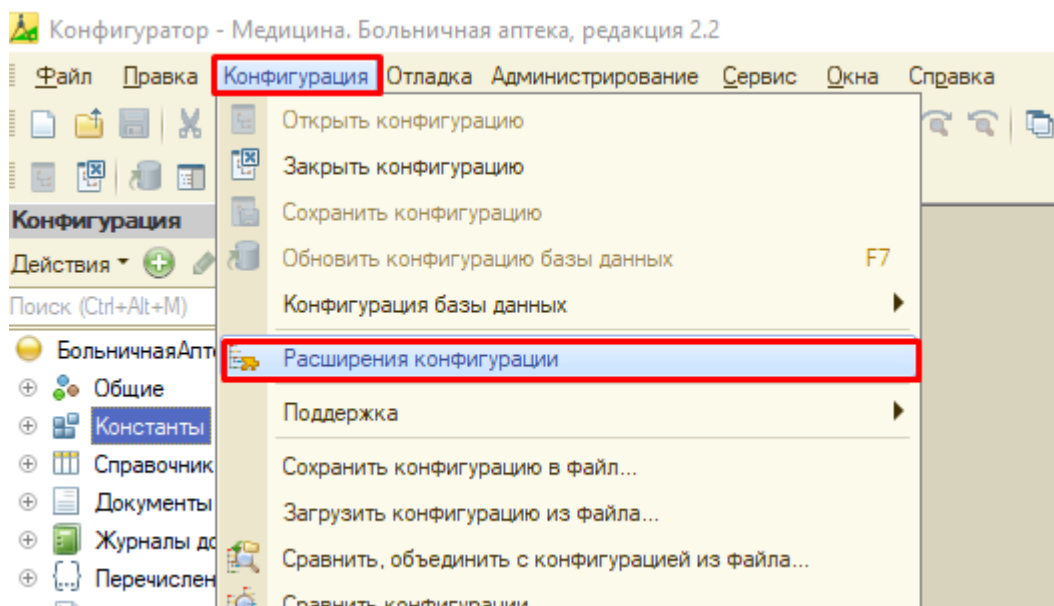


В открывшемся окне нажать кнопку добавления, данные для нового расширения оставить без изменения.

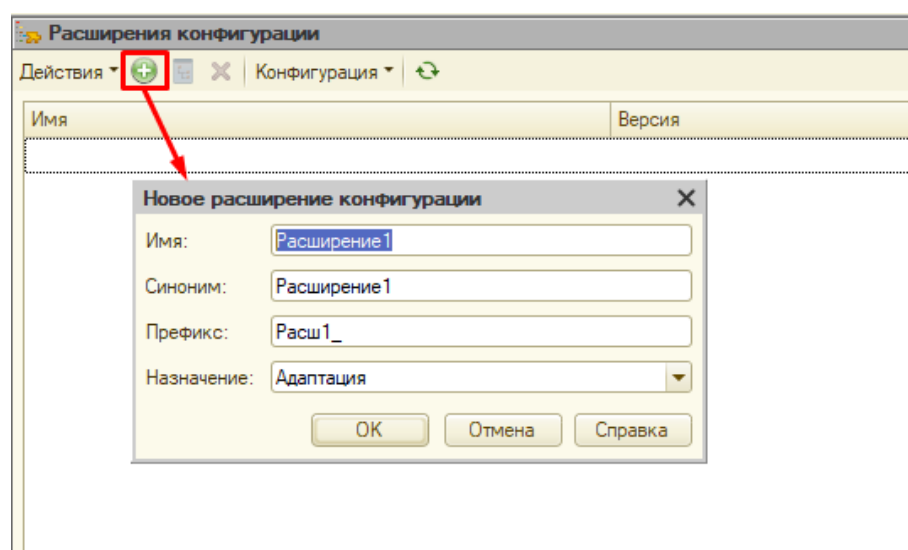


Далее в меню над списком расширений выбрать «Конфигурация» – «Загрузить конфигурацию из файла...».

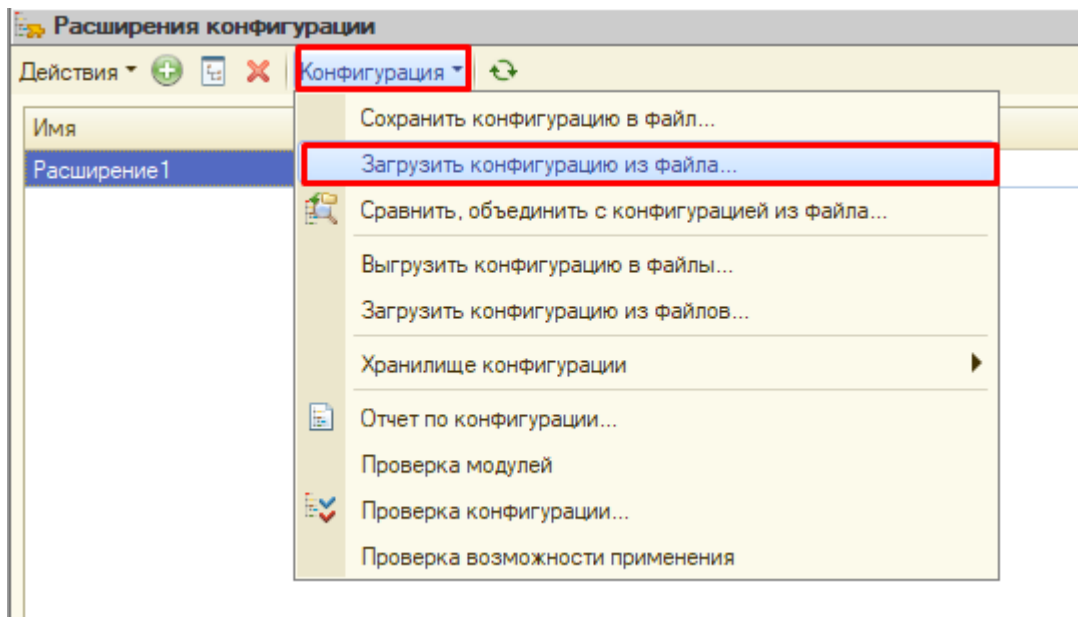


Выбрать из каталога расширение.

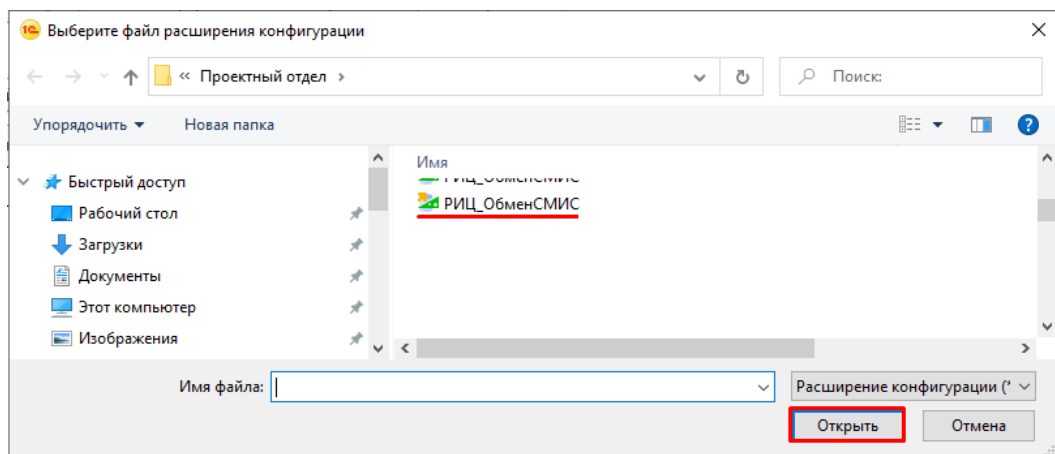


Нажать «Да» в предупреждении, что текущая конфигурация не пустая.

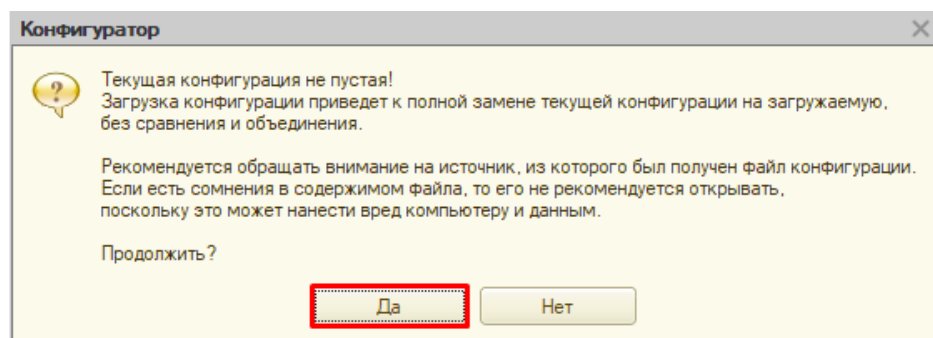

В следующем окне нажать «Да», запустив тем самым обновление конфигурации базы данных.

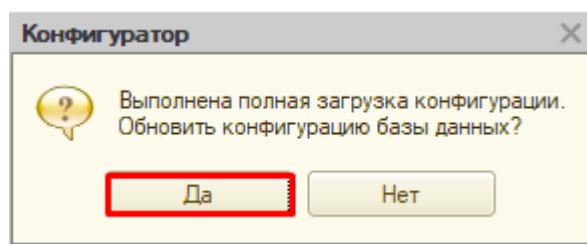

Принять изменения в структуре конфигурации.

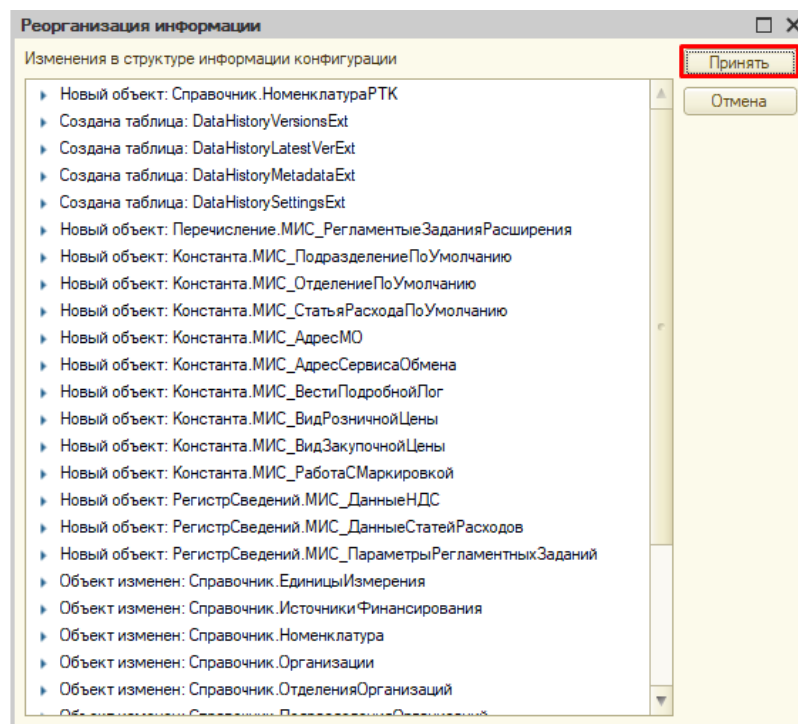

После запуска программы в пользовательском режиме можно начинать использование модуля «РИЦ модуль обмена с 1С».

3 Требования к аппаратно-вычислительному комплексу

Для работы с «РИЦ модуль обмена с 1С» минимальная конфигурация компьютеров конечного пользователя имеет следующие характеристики:

- Процессор с частотой не менее 2.33 ГГц;
- оперативная память не менее 4 ГБ;
- монитор SVGA с разрешением не менее 1024x768 точек;
- канал связи не менее 5 Мбит/сек.